

TESTES PARA HEMOGLOBINAS
VARIANT™ II HbA_{1c}

Suporte incomparável

O Serviço de Classe Mundial e o Time de Suporte da Bio-Rad são apoiados pela liderança de décadas na área das análises para Hb A1c. O VARIANT II representa nosso comprometimento contínuo em ajudá-lo a ser a diferença para os pacientes que contam com você.



Performance Incomparável

VARIANT™ II combina resultados de Hb A1c superiores, facilidade de uso excepcional e gerenciamento de dados eficiente, em uma potente solução automatizada que oferece Hb A1c, β-talassemia e ensaios duplos.

Informações para pedidos

No. Catálogo	Descrição	
270-2000	VARIANT™ II Sistema Analisador de Hemoglobinas	1 unidade
Registro M.S.: 80020690253		
270-2101NU	VARIANT™ II Hemoglobina A1c kit	1000 testes
Registro M.S.: 80020690180		
740	Lyphochek® Controle do Diabetes (2 níveis).....	6 x 0.5 mL
Registro M.S.: 80020690242		
120	Lyphochek® Hemoglobina A1c Conjunto de Linearidade (4 níveis)	4 x 0.5 mL
Registro M.S.: 80020690266		
BC80	EQAS™ Programa para Hemoglobinas	12 x 0.5 mL

Bio-Rad A1c • Seja a diferença




Bio-Rad Laboratories

Para maiores informações, por favor, contate o escritório da Bio-Rad mais próximo de você ou visite nosso site em www.bio-rad.com/diagnostics

Grupo de Diagnósticos Clínicos Website www.bio-rad.com/diagnostics U.S. 1-800-2BIO-RAD Australia 61-2-9914-2800 Austria 43-1-877-8901 Belgium 32-9-385-5511 Brazil 5521-3237-9400 Canada 1-514-334-4372 China 86-21-64260808 Czech Republic 420-241-430-532 Denmark 45-4452-1000 Finland 358-9-804-22-00 France 33-1-47-95-60-00 Germany +49-(0)89-318-840 Greece 30-210-7774396 Hong Kong 852-2789-3300 Hungary 36-1-455-8900 India 91-124-4029300 Israel 972-3-9636050 Italy +39-02-216091 Japan 81-3-6361-6902 Korea 82-2-3473-4460 Mexico +52(55)5488-7670 The Netherlands +31-318-540666 New Zealand 64-9-415-2280 Norway 47-23-38-41-30 Poland 48-22-3319999 Portugal 351-21-472-7700 Russia 7-495-721-14-04 Singapore 65-6415-3188 South Africa 27-11-442-85-08 Spain 34-91-590-5200 Sweden 46-8-555-127-00 Switzerland 41-61-717-95-55 Thailand 662-651-8311 United Kingdom +44-(0)20-8328-2000



VARIANT™ II HbA_{1c}

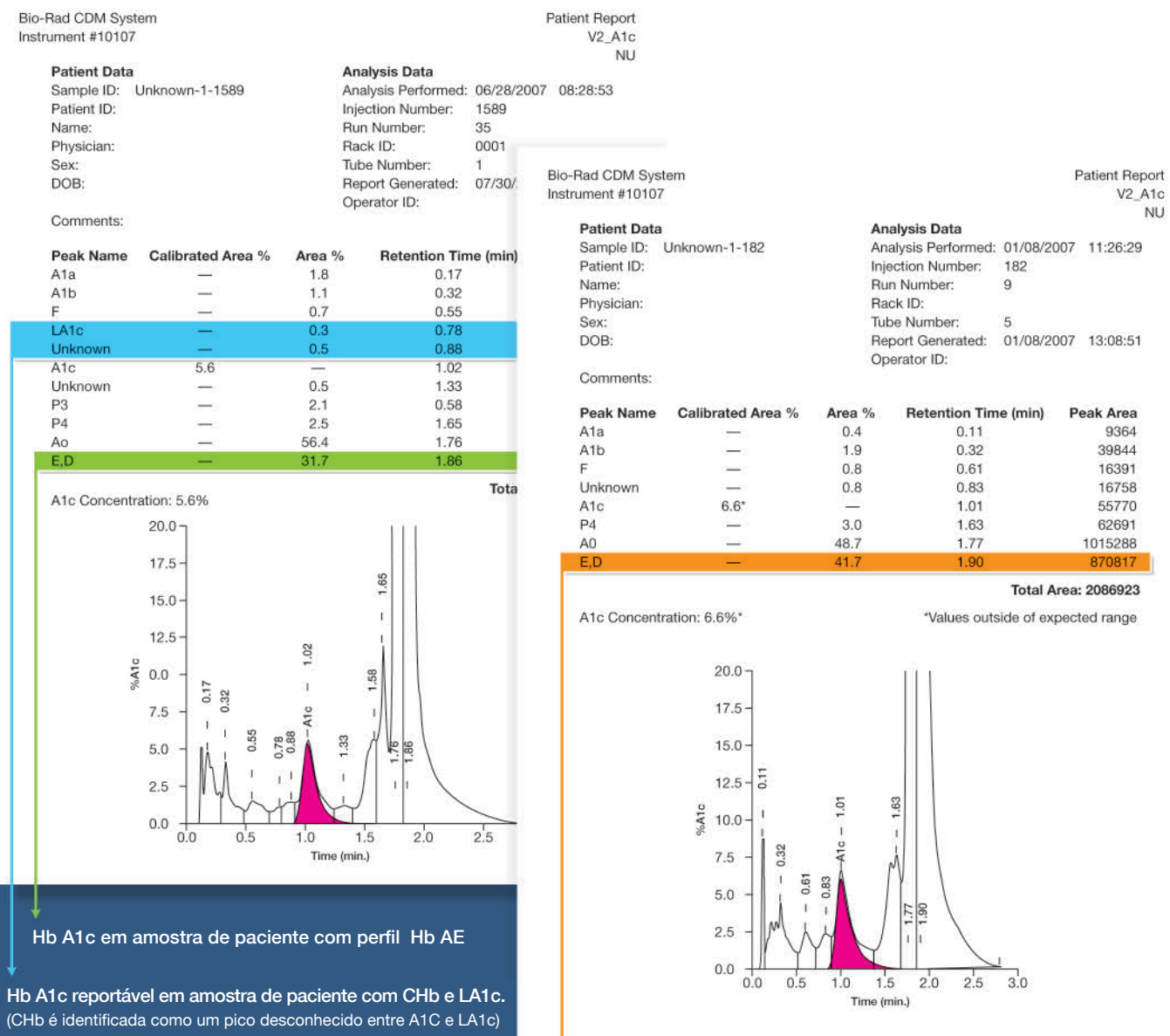

Hb A1c em amostra de paciente com perfil Hb AE

Hb A1c reportável em amostra de paciente com CHb e LA1c. (CHb é identificada como um pico desconhecido entre A1c e LA1c)

A1c reportable in patient sample with HbD trait

Precisão Superior - HbA_{1c}

- Precisão da dosagem de Hb A1c na presença das hemoglobinas D, E, S ou C.
- Precisão na dosagem de Hb A1c na presença de hemoglobina carbamíladada (CHb) e Hb A1c Lábil (LA1c)
- Método de referência do IFCC
- Certificado pelo NGSP e rastreável pelo Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)

Resultados de Qualidade





Superior
Precisão na dosagem
de Hb A1c

VARIANT™ II HbA_{1c}

Atenção de qualidade ao paciente está no cerne do que você faz. E o VARIANT II Hb A1c lhe permite ser a diferença para os pacientes que contam com você - entregando a melhor química do mercado para resultados excepcionalmente precisos.

Excepcional
Fácil de usar

Potente
Gerenciamento de dados

O Sistema para Análise de Hemoglobinas é flexível, eficiente e utiliza a metodologia com padrão ouro, de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) para entregar valores excepcionalmente precisos de Hb A1c na presença de hemoglobinas variantes e outras substâncias interferentes.



*Seus pacientes contam com você.
Você pode contar com VARIANT™II.*

Excepcional facilidade de uso

- Operação completamente automatizada poupa tempo e trabalho
- Gerenciamento de controle de qualidade embutido simplifica o cumprimento da garantia da qualidade
- Fornecimento de reagentes em formato conveniente de kit
- Nível dos reagentes facilmente visualizável devido à transparência dos frascos
- Coleta de amostra a partir do tubo primário por meio de perfurador de tampas, elimina o manuseio de amostras
- Acompanhamento positivo de amostras elimina erros de identificação
- Função STAT
- Amostragem em lotes e alimentação contínua oferecem flexibilidade no fluxo de trabalho
- Ferramentas de Controle de Qualidade, instrumentos de apoio, educação remota e serviços de comunicação com o cliente fáceis de usar.
- Kit de Coleta Capilar permite coleta remota de amostras por punção digital, fornecendo suporte à programas de extensão

Not available in the U.S.

*Todo paciente merece resultados de qualidade.
Você merece **Facilidade de Utilização***

Gerenciamento de Dados Eficaz

- Resultados e cromatogramas capturados e arquivados pelo Software Clinical Data Management™(CDM)
- O CDM™ é interfaciável com o sistema de informações do seu laboratório fornecendo um melhor gerenciamento de dados.
- Diagnósticos avançados, alertas ao usuário e lembretes, reduzem custos e tempo de treinamento.

