


IH-Com
Software de Gerenciamento de Dados e Interpretação
de Resultados

IH-Com

Software de Gerenciamento de Dados e Interpretação de Resultados

IH-Com combina o gerenciamento de dados, de Controle de Qualidade, de amostras e de equipamentos em uma solução de software flexível.

Com uma arquitetura de software inovadora desenvolvida acerca de uma abordagem direcionada ao paciente para o gerenciamento de resultado, o IH-Com faz a comunicação entre os equipamentos Bio-Rad e o LIS perfeitamente.

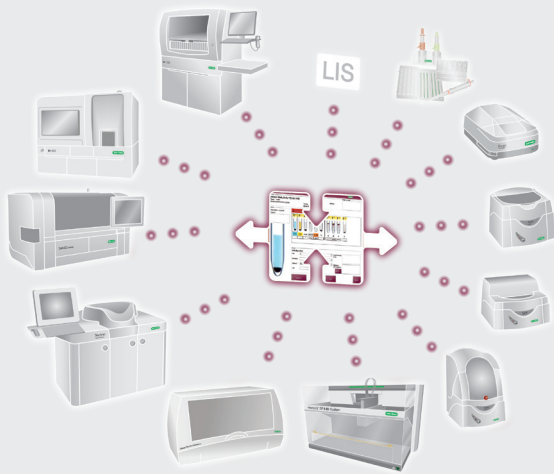

• Módulo Paciente mostra todas as informações relevantes dos pacientes


• Mostra a lista de trabalho definida (do Sistema Central ou criada manualmente)

• Procedimento destinado ao trabalho com a estação de trabalho manual

• Tela de resultados mostrando todos os resultados disponíveis por pacientes


• Módulo de Controle de Qualidade integrado personalizável

• Mostra os instrumentos conectados

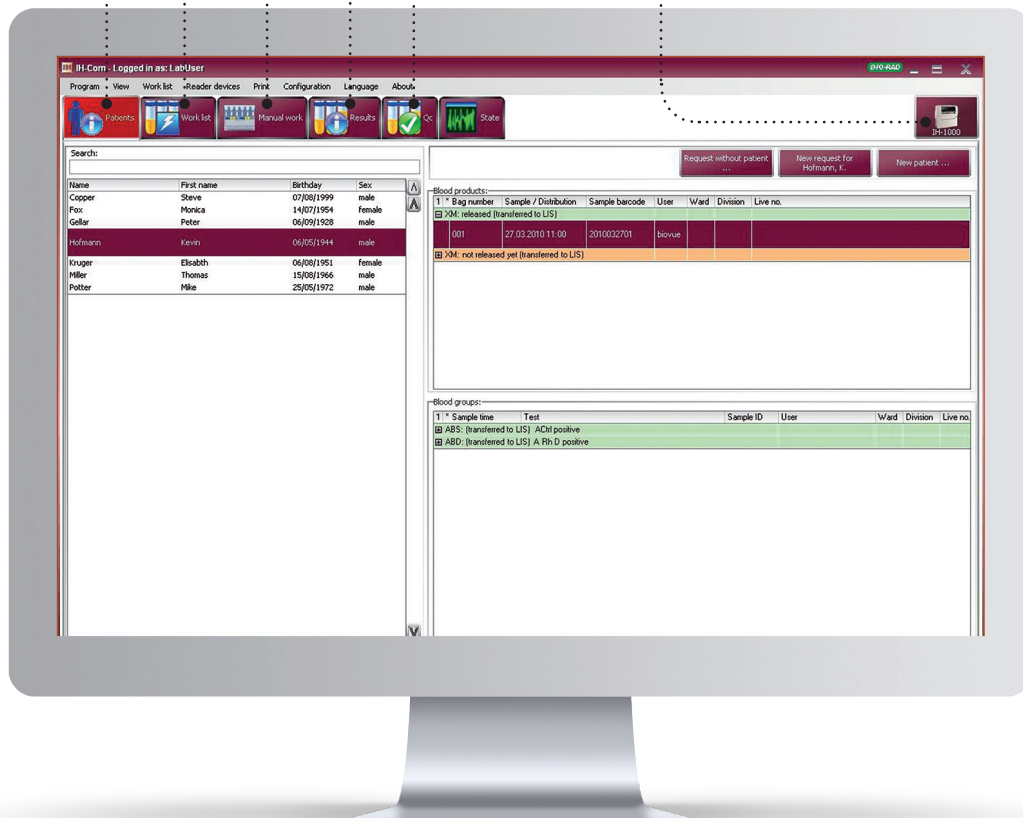

Software com Arquitetura Inovadora

- **IH-Com** pode ser usado com todos os pipetadores automáticos, equipamentos totalmente automatizados e leitores que a Bio-Rad oferece para Imuno-hematologia.
- Os resultados obtidos em técnicas não automatizadas são facilmente incluídos através da estação de trabalho manual, um recurso pioneiro e especificamente projetado para o **IH-Com**.
- Múltiplos equipamentos podem ser conectados em rede através do **IH-Com**, permitindo o acesso de um local único para informação do paciente, de listas de trabalho e de resultados.
- O design robusto do software mantém a conexão de dados entre estações de trabalho mesmo se a conexão ao banco de dados principal for interrompida momentaneamente.
- **IH-Com** centraliza os dados em um banco de dados, ou seja, apenas uma conexão com o LIS é necessária.

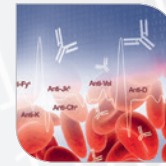


Módulos adicionais disponíveis:
IH-ABID, BRiCare & IH-Web



Resultado orientado ao paciente

- O **IH-Com** coleta todos os resultados associados com a identificação do paciente e fornece uma interpretação imuno-hematológica global. Isto inclui confirmação de testes e cruzamento com resultados prévios.

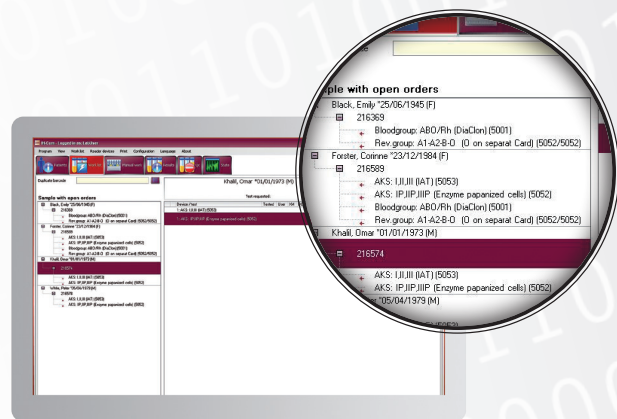


Tela Lista de Trabalho

Interpretação e Validação

- A validação de resultados pode ser adaptada para suas necessidades individuais, incluindo:
 - Autovalidação
 - Validação em duas etapas (p.ex. técnico e supervisor)
 - Validação em uma etapa
- Fotos coloridas de alta resolução podem ser ampliadas, permitindo ao usuário avaliar até as reações mais fracas. Mediante solicitação, o usuário pode também modificar* e comentar estes resultados.
- Resultados incompletos ou discrepantes são claramente destacados para facilitar a ação adequada pelo usuário.

* Depende do nível de autorização com rastreabilidade no banco de dados

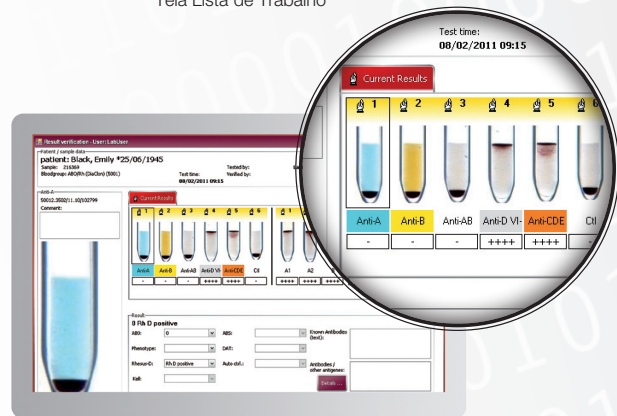

Tela Resultados

Módulo de CQ

- **IH-Com** possui um módulo de CQ integrado e totalmente personalizável.
- Através da aplicação de um método direcionado ao lote de reagente é possível garantir que todos os produtos em uso tenham o desempenho controlado. Além disso, este módulo é configurável em termos de frequência e tipo de teste de CQ.



Tela Controle de Qualidade

Características Principais

- Interface amigável e intuitiva
- Única conexão central para todos os instrumentos
- Documentação Eletrônica
- Armazenamento a longo prazo das imagens dos testes e dos resultados dos pacientes
- Cruzamento automático com resultados prévios
- Função *back-up* automático
- Módulo de Controle de Qualidade integrado
- Módulo de estatística
- Estação de trabalho manual
- Certificado CE, de acordo com a Diretiva IVD 98/79/EC

Equipamentos conectados ao IH-Com



**IH-500
System**



**IH-1000
System**



**TANGO infinity™
System**



**TANGO™ optimo
System**



**Classic
ID-GelStation**



**Techno
TwinStation**



**HemOS™ SP II
TwinSampler**



**Swing
TwinSampler**



**Lyra
MP-Reader**



**Saxo
ID-Reader**



**Banjo
ID-Reader**

Informações para pedidos

Catalogo #	Descrição
009000	IH-Com Versão Completa
009010	IH-Com Kit para Leitores
12008573	IH-A^βID
009030	IH-Web
2000050	BRIcare Software

Visite www.bio-rad.com/immunoematology para mais informações.



BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories**

Grupo de
Diagnóstico Clínico

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** 61-2-9914-2800 **Austria** 43-1-877-8901 **Belgium** +32 (3)710-53-00 **Brazil** +55 (31)3689-6600 **Canada** 1-514-334-4372 **China** 86-21-61698500 **Czech Republic** 420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** 358-9-804-22-00 **France** 33-1-47-95-60-00 **Germany** +49 (0)89-318-840 **Greece** 30-210-7774396 **Hong Kong** 852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100 **India** 1800-180-1224 **Israel** 972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** 81-3-6361-7070 **Korea** 82-2-3473-4460 **Mexico** +52 (55)5488-7670 **The Netherlands** +31-318-540666 **New Zealand** 64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** 48-22-3319999 **Portugal** 351-21-472-7700 **Russia** +7-495-721-1404 **Singapore** 65-6415-3170 **South Africa** 27-11-442-85-08 **Spain** 34-91-590-5200 **Sweden** 46-8-555-127-00 **Switzerland** +41 (0)26-674-55-05/06 **Taiwan** 886-2-2578-7189 **Thailand** 662-651-8311 **United Kingdom** +44 (0)20-8328-2000